

Baby scales

Электронные детские весы
со съёмной чашей



Инструкция
по эксплуатации

2 in 1

Весы бытовые 2 в 1 Happy Baby®

Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием весов.

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Меры предосторожности:

- Используйте весы на ровной, твёрдой, сухой поверхности.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра на весах, даже на короткое время.
- Аккуратно кладите ребенка на весы. Резкие движения могут привести к падению и серьезным травмам.
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы перед использованием.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.
- Это электронное изделие. Не подвергайте его воздействию высоких температур и влажности. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и/или нагрева.
- Не мочите и не погружайте в воду электронный блок.

Внимание!

- Не используйте разряженные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Всегда используйте батарейки только одного типа.
- При установке батареек соблюдайте полярность, указанную в отсеке для батареек.
- Не проводите установку батареек вблизи источников огня.

Технические характеристики

Габариты в сборе: 510x325x65 мм

Вес в сборе: 1,95 кг

Диапазон взвешивания: 0,5 кг – 180 кг; 1,1 фунта – 396 фунтов

Точность: 5 г (0,01 фунта) для диапазона 0–20 кг (0–44 фунта)
50 г (0,1 фунта) для диапазона 20–180 кг (44–396 фунтов)


Дисплей: 80x36 мм, с подсветкой (ночной режим)

Единицы измерения: кг / фунты (lb) / унции (oz) / фунты:унции (lb:oz)

Платформа: закалённое стекло (6 мм) и пластиковая чаша

Датчики: высокоточные тензометрические

Питание: 3 батарейки AAA 1,5V (включены в комплект)

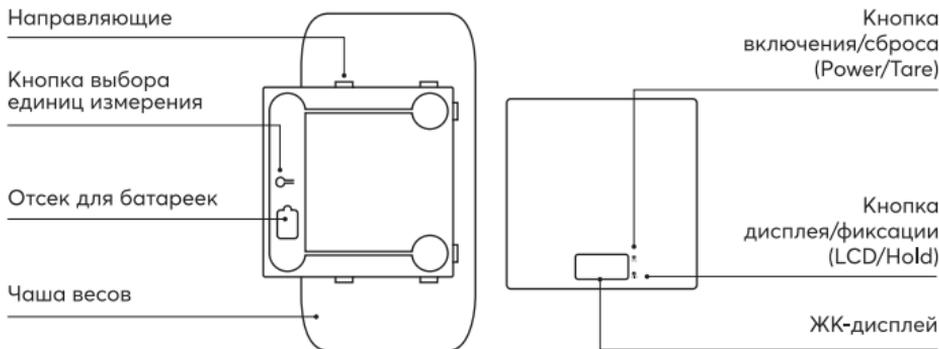

Инструкция по использованию

Взвешивание ребёнка

Нажмите кнопку Power/Tare для включения. Когда на дисплее появится «0», весы готовы к работе. Для выбора единиц измерения нажмите кнопку, расположенную рядом с отсеком для батареек. **Важно!** Аккуратно положите ребёнка на чашу, поддерживая голову. Если используете пелёнку/полотенце, сначала положите их на весы.

Функция автосброса (TARE): работает для веса до 500 г. Значение сбрасывается через 5 секунд. Для предметов тяжелее 500 г нажмите LCD/Hold, затем Power/Tare (на дисплее появится «---»).

Режим фиксации (HOLD):

Автофиксация: вес отображается 30 секунд после стабилизации.

Ручная фиксация: если ребёнок движется, нажмите LCD/Hold при его спокойном состоянии. Вес зафиксируется через 3 секунды.

Взвешивание взрослого

Снимите чашу (если установлена). Включите весы кнопкой Power/Tare. Нажмите LCD/Hold, чтобы развернуть дисплей для удобного чтения.

Важно! Кнопка Power/Tare блокируется во избежание случайного нажатия ногами. Встаньте на платформу до появления фиксированного значения. Для выключения удерживайте Power/Tare (или весы отключатся автоматически через 30 секунд). Для повторного включения слегка надавите на платформу.

Устранение неисправностей

Ошибка	Возможная причина	Решение
EEEE	Превышен макс. вес (180 кг)	Не нагружайте весы сверх нормы
Lo	Разряжены батарейки	Замените батарейки
Дисплей не включается	Батарейки разряжены или установлены неправильно	Проверьте полярность и замените
Неточные показания	Весы на мягкой поверхности или движение во время взвешивания	Перезапустите весы, поставьте их на твёрдую поверхность

Гарантийный талон

Сохраняйте гарантийный талон и обращайтесь к продавцу при возникновении проблем с качеством.

Изделие	
Дата изготовления изделия (указано на упаковке)	
Название и адрес торговой организации	
Дата приобретения	
Печать фирмы продавца	

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 1 год с момента совершения покупки. Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного изделия вместе с правильно заполненным талоном.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Расходные элементы и материалы (картриджи, аккумуляторные источники питания, батареи и т.п.);
2. Зарядные устройства;
3. Естественно изнашиваемые в процессе эксплуатации части: ножи, мембраны сменные фильтры, насадки, трубки и т.д.;
4. Повреждения, возникшие из-за подключения в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации;
5. Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
6. Повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи.

Артикул 40101 (модель EB530)

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

